

Cama hospitalaria eléctrica

5 movimientos - Tipo UCI

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2021DM - 0023963

Especificaciones

YKB001-2 (320)

Diseñada para cuidados intensivos. Ofrece 5 movimientos independientes: elevación de espaldar, de pieceros, de altura, Trendelenburg y Trendelenburg inverso y funciones especializadas como RCP y silla cardíaca. Construida con materiales resistentes y fáciles de desinfectar, cuenta con 4 motores silenciosos, batería de respaldo y dos controles (Cuidador y personal médico) que permiten un ajuste preciso y personalizado de la posición del paciente. La función de bloqueo de controles y las barandas de seguridad garantizan protección en todo momento. Ideal para pacientes que requieren cuidados críticos.

Este producto se encuentra sujeto a inventario.

Imagen ilustrativa*

Tendido de 4 planos en lámina ranurada.

Estructura de acero con acabado en pintura electrostática.

Tableros de cabecero y pieceros fabricados en plástico ABS.

4 barandas en plástico ABS con descenso regulado a través de pistón.

4 Ruedas de 6" con bloqueo central.

Movimientos del producto



0 - 12°

Trendelenburg



0 - 12°

Trendelenburg
inverso



45- 76cm

Graduación
de altura



0 - 80°
(+5)

Elevación
de espaldar



0 - 40°

Elevación
de pieceros

Detalles del producto



Gancho bolsa de drenaje



Control eléctrico principal



Porta sueros



Control del paciente

+ Incluye

 Batería de respaldo

 2 controles

 4 motores silenciosos

Cuenta con 2 controles:


- **Uno en la parte superior** con los movimientos de espaldar, pies, cambio de altura, trendelenburg y CPR.
- **Uno en la parte inferior** para uso médico, cuenta con movimientos de espaldar, pies, cambio de altura, trendelenburg, CPR y TR, adicional tiene la función silla cardiaca, igualmente cuenta con la opción de bloquear o desbloquear el control del paciente.

Medidas sin colchón


Capacidad de peso

 **240kg**

Externas

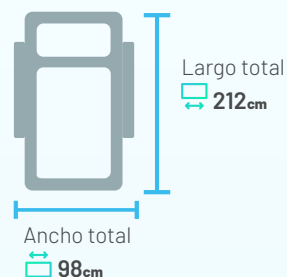

Del tendido

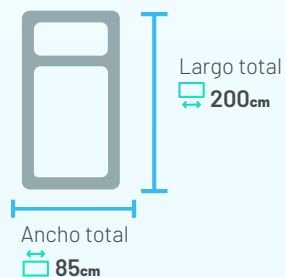

***Medida sugerida de colchón: 1,90 x 90**

"Todas nuestras medidas tienen un intervalo de +-2cm de diferencia."

Recomendaciones

- Para subir o bajar al paciente, sitúe la cama en la altura mínima o en la que el paciente pueda toca el piso.
- Accione el freno central, siempre que vaya a dejar la cama en un sitio fijo para evitar accidentes.
- No permita que los controles sean accionados por personas inexpertas o en modo de juego.
- Verifique regularmente que las barandas estén ajustadas.
- Realice un aseo general a la cama de manera periódica con un paño húmedo, posteriormente séquela, no utilice productos fuertes que puedan afectar la pintura.
- Ubique la cama en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar corrosión.
- Nunca exceda la capacidad máxima de carga de la cama.
- Puede lubricar los tornillos móviles con regularidad, si desea acompañamiento de nuestro personal, contáctenos.

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura, no cubre partes plásticas.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.